



VG798WB
Déambulateur réglable en hauteur



Ce fichier est disponible pour visualisation en téléchargement au format PDF à l'adresse www.aidapt.co.uk. Les clients malvoyants peuvent utiliser un Lecteur PDF gratuit (tel que adobe.com/reader) pour zoomer et augmentez la taille du texte afin d'avoir une meilleure lisibilité.

Instructions de fixation et d'entretien

UTILISATION PRÉVUE

Votre déambulateur a été conçu pour vous aider à marcher et à transporter de petits objets dans votre maison. Il n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur.

IMPORTANT - USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

Remarque: Toujours consulter le prescripteur / physiothérapeute en cas de doute afin de vérifier que ce produit est adapté à votre utilisation. NB Cet équipement doit être installé par une personne compétente

NB Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

Déambulateur VG798WB réglable en hauteur

Poids Max.de l'utilisateur 135 kg

Poids Max.sur le plateau 15kg

Ne dépassez pas la limite de poids indiquée - cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

AVANT UTILISATION

Enlevez soigneusement tous les emballages et évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants car ils pourraient endommager la surface du produit. Vérifiez si le produit présente des dommages visibles et si vous constatez des dommages ou soupçonnez un défaut, n'utilisez pas l'équipement et contactez votre revendeur.




ASSEMBLAGE

Faites glisser les pieds dans les tubes de chaque côté de la cadre principal (A).

Assurez-vous que les rebords des plateaux sont face en avant (B) et que les poignées font face vers l'arrière et que les ailerons ergonomiques des poignées sont tournés vers l'intérieur (C). Passez la vis fournie à travers le bras et placez la rondelle sur la vis (D).

Ne placez pas la rondelle en premier et insérez la vis à travers elle car cela empêche la tête du boulon de se bloquer à la découpe hexagonale de l'autre côté du tube et fera en sorte que les bras soient lâches. Fixez avec la vis à ailettes (E).

Répétez le processus de l'autre côté en vous assurant que les deux pieds sont à la même hauteur.

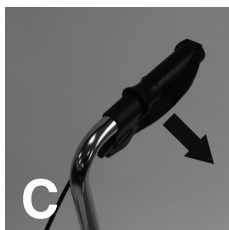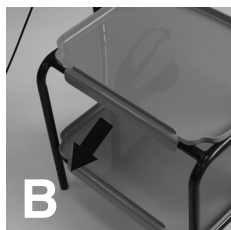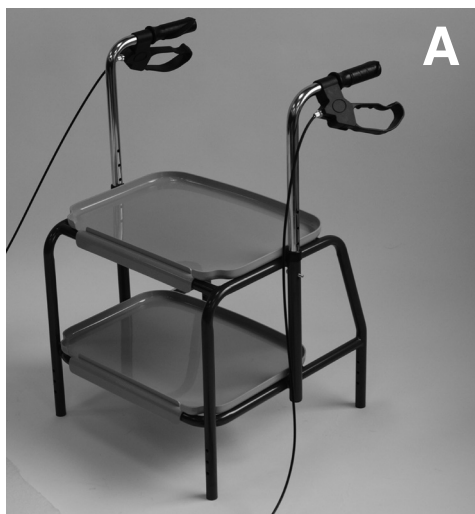


ASSEMBLAGE (A CONTINUÉ)

Fixez les roues arrière au cadre (F) (veuillez noter les roues arrière se fixent dans les poteaux angulaires et directement sous les poignées. Assurez-vous que lorsque vous avez attaché les roues arrière les freins se trouvent à L'EXTÉRIEUR du chariot (F)

Fixez les roues arrière avec le clip en forme de E (G) Répétez le processus de l'autre côté en vous assurant que les deux pieds sont à la même hauteur. Fixez les roues à l'avant au cadre (H) (veuillez noter les roues avant se fixent dans les poteaux droits et directement sous les rebords du plateau).


Fixez les roues avant avec le clip en forme de E (J) Répétez le processus de l'autre côté en vous assurant que les deux montants sont à la même hauteur.

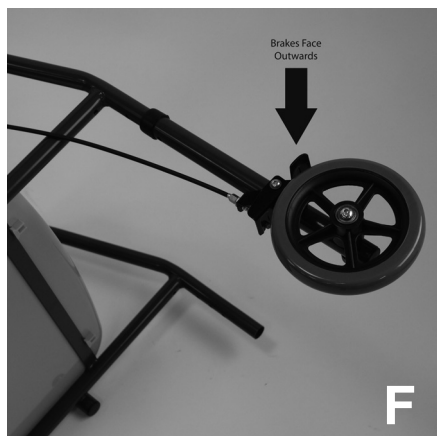

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Votre chariot peut être réglé en hauteur

- Pour régler la hauteur, retirez le clip «E» inférieur des rallonges et tirez chaque jambe à la hauteur désirée. (Voir fig. 1.)
- Assurez-vous que les quatre pieds extensibles sont uniformément ajustés.
- Réinsérez tous les clips «E» face à la ligne de déplacement en veillant également à ce que les clips «E» soient passés à travers le cadre du produit et du pied extensible et soient sécurisés. (Voir fig. 2)
- Ne réglez jamais les pieds de manière inégale, c'est dangereux et cela peut sérieusement compromettre la sécurité de l'utilisateur. Vérifiez que le chariot est posé uniformément sur le sol et qu'il n'y a pas de balancement excessif ou que le chariot ne penche pas d'un côté. Si c'est le cas, n'utilisez pas le chariot, et répétez les étapes ci-dessus pour corriger le problème ou contacter votre revendeur.

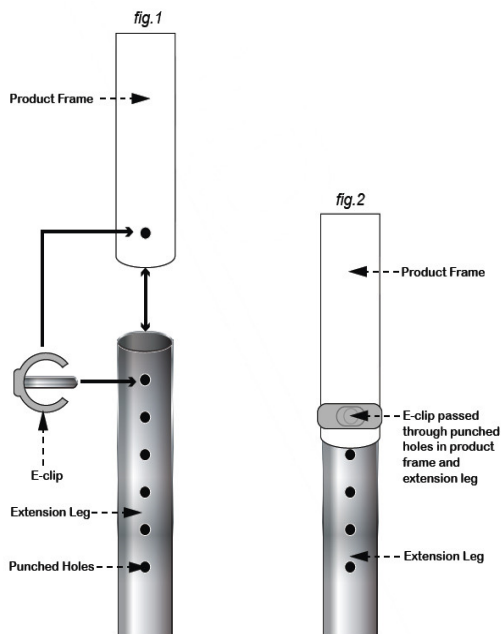

UTILISATION DES FREINS

Le frein manuel de votre Déambulateur Aidapt fonctionne de manière très similaire à un frein de bicyclette:

1. Pour arrêter, appliquez doucement une pression sur les deux freins simultanément (voir fig. 3), cela ralentira et arrêtera le déambulateur. 2. Les freins de votre déambulateur Aidapt ont une option de stationnement (voir fig. 4). Pour utiliser l'option parking, enfoncez les deux freins simultanément. Vous sentirez le frein faire un très léger clic. Les freins sont maintenant en position de verrouillage. 3. Pour déverrouiller, relevez simplement le frein, vous entendrez un léger clic lorsque le «stationnement» se désengagera.



RÉGLAGE DES FREINS



Your Aidapt Trolley Walker brake system will require periodic adjustment. The brake adjustment is similar to bicycle brakes;

Le système de freinage du déambulateur Aidapt nécessite un ajustement périodique. Le réglage des freins est semblable aux freins de vélo;

1. La Fig. 5 montre la poignée de frein par défaut position livrée. Si les freins ont besoin d'être ajustés, vous pouvez les serrer en déverrouillant l'écrou A puis dévissez l'écrou B.

2. Une fois ajustés, les freins devraient fonctionner dans les deux sens normaux et en mode parking. Si nécessaire, vous pouvez tourner l'écrou B (voir fig. 5 et fig. 6) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui resserrera davantage le câble de frein.

Lorsque vous êtes satisfait du réglage du frein, resserrez l'écrou A.

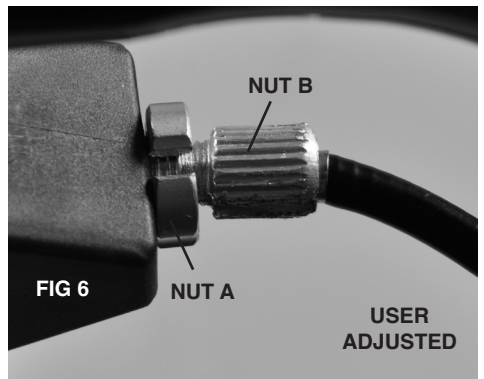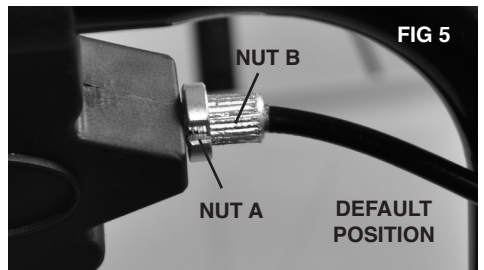

RÉGLAGE DES FREINS (A CONTINUÉ)


3. Si les poignées de frein sont complètement ajustées et que d'autres ajustements sont nécessaires, voir fig. 7. La vis C est déverrouillée et l'écrou D est dévissé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour resserrer davantage le câble ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer.

4. Resserrez la vis de blocage C (voir fig. 7), puis ajustez les freins à l'aide des notes 2 et 3 de la poignée.

5. Après le réglage, vérifiez les freins de stationnement en appuyant sur les poignées de freins, en vous assurant que les deux freins se verrouillent en position de stationnement.

6. Avec les freins de stationnement désactivés, levez les deux roues freinées du sol et faites-les tourner pour vous assurer qu'elles tournent librement. Si l'une des roues freinées frotte sur le bras de frein (voir fig. 7), vérifiez que rien ne bloque et répétez la procédure de réglage du frein ci-dessus. Vérifiez que rien ne bloque et répétez la procédure de réglage du frein ci-dessus.

7. Il est important de vérifier régulièrement les réglages des freins pour tenir compte de l'usure. Toutefois, le réglage des freins doit être vérifié au moins une fois par mois et avant tout changement d'utilisateur.

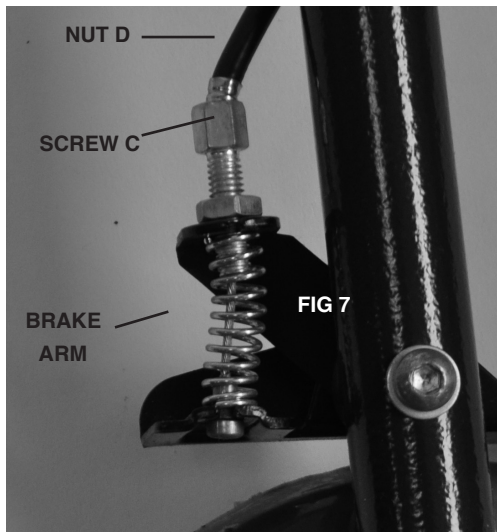

SOINS ET ENTRETIEN & VOS OBLIGATIONS

1. Vérifiez que toutes les roues fonctionnent correctement et que toutes les roues bougent librement. Portez une attention particulière aux roues avant, en veillant à ce qu'elles tournent librement et sans obstruction.



Retirez immédiatement votre Aidapt Trolley Walker si l'une des roues devient difficile à tourner ou si vous suspectez des dommages ou toute autre faute.

2. Contrôles mensuels - Vérifiez qu'aucun composant n'est desserré. Vérifiez le réglage de vos freins. Assurez-vous que les freins sont correctement réglés, vérifiez les roulettes et les roues.

3. Ne montez aucune pièce ni aucun accessoire sur votre chariot Aidapt fabriqué par une autre société. Faire cela annulera votre garantie et pourrait sérieusement compromettre votre sécurité.

4. Nous vous suggérons de vérifier visuellement votre chariot Aidapt chaque jour. Cependant, nous vous recommandons de réviser votre chariot tous les trois mois ou moins s'il est utilisé par, ou remis à différents utilisateurs.

NETTOYAGE

Nettoyez votre chariot à l'aide d'un nettoyeur non abrasif ou d'un détergent doux et d'un chiffon doux. Les nettoyeurs abrasifs, par exemple les tampons de nettoyage AJAX et / ou abrasifs peuvent sérieusement endommager le produit et ne doivent pas être utilisés. Veuillez toujours à essuyer l'équipement après le nettoyage.

Les plateaux à clipser en polypropylène peuvent être retirés pour le nettoyage. Pour les retirer, placez votre doigt et votre pouce sur le dessous du clip en U au-dessus de la section en U insérée, poussez vers le haut et retirez-les.

Le plateau peut être nettoyé avec un détergent doux ou un désinfectant, ou bien lavé sous pression ou autoclave à une température allant jusqu'à 90°C.

NETTOYAGE DES ROULETTES ET DES ROUES

Les déambulateurs Aidapt sont fournis avec des roulettes avec un corps en polypropylène ou avec des roulettes avec un corps en acier.

Les roulettes en polypropylène ou les roulettes en acier peuvent être retirées du cadre en retirant le clip « E » retenant le pied extensible. Une fois terminé, lavez la roulette dans un seau de détergent doux ou désinfectant.

Cependant, assurez-vous de bien sécher la roulette et le pied extensible avant le remontage et de terminer en appliquant un agent dispersant l'eau, tel que le WD40, sur la roue et le corps du ricin avant le remontage.

Après le nettoyage, veuillez répéter toutes les étapes décrites dans RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (voir fig. 1 et la fig. 2)

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication.

Une mauvaise utilisation ou des dommages ne sont pas couverts.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

IMPORTANT INFORMATION

Les informations données dans ce manuel ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante ou établissant un engagement contractuel ou autre de Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt(Wales) Ltd ou ses agents ou ses filiales et aucune garantie ni déclaration concernant les informations données.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit. Comme utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant le montage/ l'utilisation de votre produit.

En cas de doute, veuillez ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement votre revendeur pour le service après-vente.

Aidapt Bathrooms Ltd.

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

Tel: 05 63 48 15 1 Fax: 05 63 37 61

Email: Altai.Europe@orange.fr

