

# ABENA Pants Premium S1

## INCONTINENCE

### ABENA Pants

**S1**



60 – 90 cm



5 gouttes				Light M	Light L		
<b>6 gouttes</b>		XS1	<b>S1</b>	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

### UTILISATEURS

UNISEXE

AUTONOME / SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE SÉVÈRE

JOUR

### Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.



#### Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1


La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

#### Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

#### Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

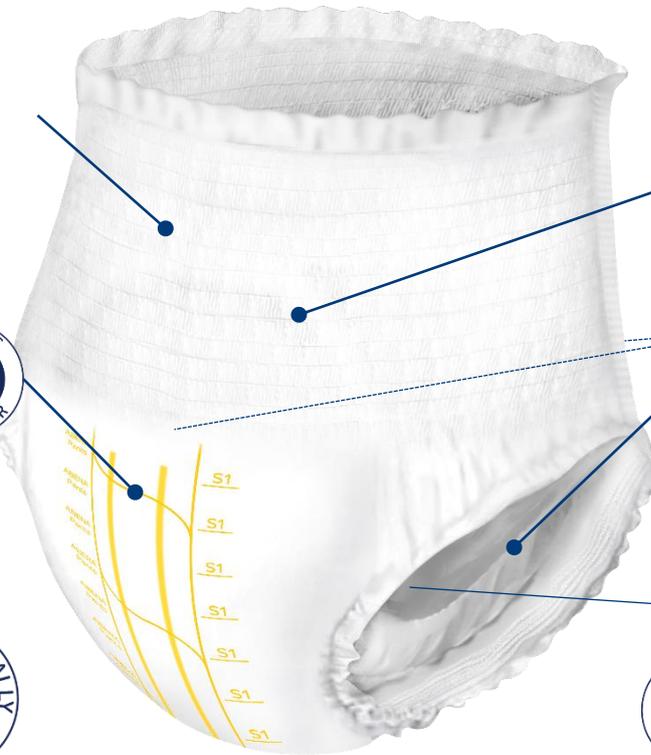

#### 100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



#### Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.



#### Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



#### Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



# ABENA Pants Premium S1

## DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	780 mm – 550 mm
Poids (+/-10%) :	72,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical  
Classe 1  
MDR (EU) 2017/745



Le produit ne contient pas de latex



100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 11948-1  
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



### 30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



### Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

### Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

### Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO<sup>2</sup> de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

### Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

### Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



# ABENA Pants Premium S1

## DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571000786	1 186	23 x 18 x 21	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette (gerbée)	Hauteur palette (cm)
6	5713571000793	7 753	67,6 x 30,1 x 35,2	12 (24)	121



## GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants S1 est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 60-90 cm.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.



2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.



3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

### PRODUITS ASSOCIÉS

Le choix et la combinaison adéquats des protections d'incontinence



Une approche structurée de l'hygiène

Toilette & soins de la peau adaptés

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

[www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

