



Photo du modèle avec option ACCCOUSSIN-01 Coussin 50 x 40 cm, option ACCMULTIK02-PIE pédale d'urgence position de Trendelenburg rapide et option ACCMUL-BPPIEDS poignées de poussée rétractable côté pieds.

Fauteuil ambulatoire électrique
Gamme MULTIKA Version 2
MULT-V2-65-AM1

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ambulateur à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Matelas confort monobloc, épaisseur 9cm (6cm de mousse HR35 + 3cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme), largeur 65 cm
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques, débrayable pour le dossier
- Position de Trendelenburg
- Equipé d'une paire de barrières pleines escamotables avec poignées de déclenchement adaptées et ergonomiques
- Equipé de 4 roulettes diamètre 150 mm à freinage centralisé à l'aide de 2 pédales côté pieds et une barre de freinage côté tête
- Barre de poussée fixe côté tête
- Piètement cartérisé pour une hygiène optimale et une sécurité des parties mobiles, coloris gris clair RAL 7035
- Equipé d'une batterie

DIMENSIONS

- Largeur 65cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

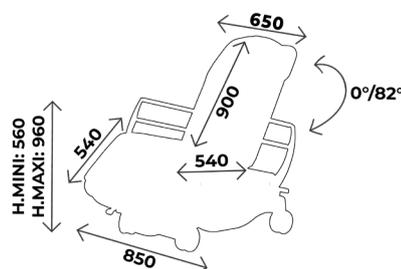

Vous aimerez aussi :

Ref. **MULT-V2-75-AM1** : Idem MULT-V2-65-AM1 mais largeur 75 cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ZOOM MULT-V2-65-AM1 Avec accessoires



ACCESSOIRES



ACC CAPOT
Peinture capot
Autre que le gris standard (7035)
16 coloris disponibles



ACC125
Porte rouleau draps d'examen



ACCMUL-320INO1
Tige porte-sérum rétractable,
2 crochets polyamide



ACCCOUSSIN-01
Coussin confortable
50 x 40 cm



ACC514-MULTIKA1
Protection jambière plastique



ACCMULTIK05-BA1
Tablette lecture et collation



ACCMULTIK30
Pochette porte dossier médical,
fixation dans le dossier



ACCMULTIK08-AM1
Porte obus avec sangles de
serrage



ACCMULTIK02-PIE
Pédale d'urgence position de
Trendelenburg rapide



ACCMUL-BPPIEDS
2 poignées de poussée
rétractables côté pieds



ACCEQUIPOTENT01
Prise équipotentialité



ACCMUL-5ROUES
5ème roue pour optimiser les
transferts et la mobilité du
fauteuil

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
sans plus value

Revêtement : Sellerie Gamme Classique






Revêtement : Sellerie Gamme Urban




COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme MULTIKA a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**

Piètement Peinture EPOXY

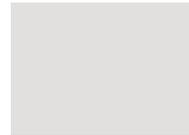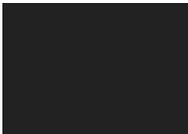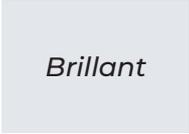				
RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
				
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
				
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003
				
		SILVER		

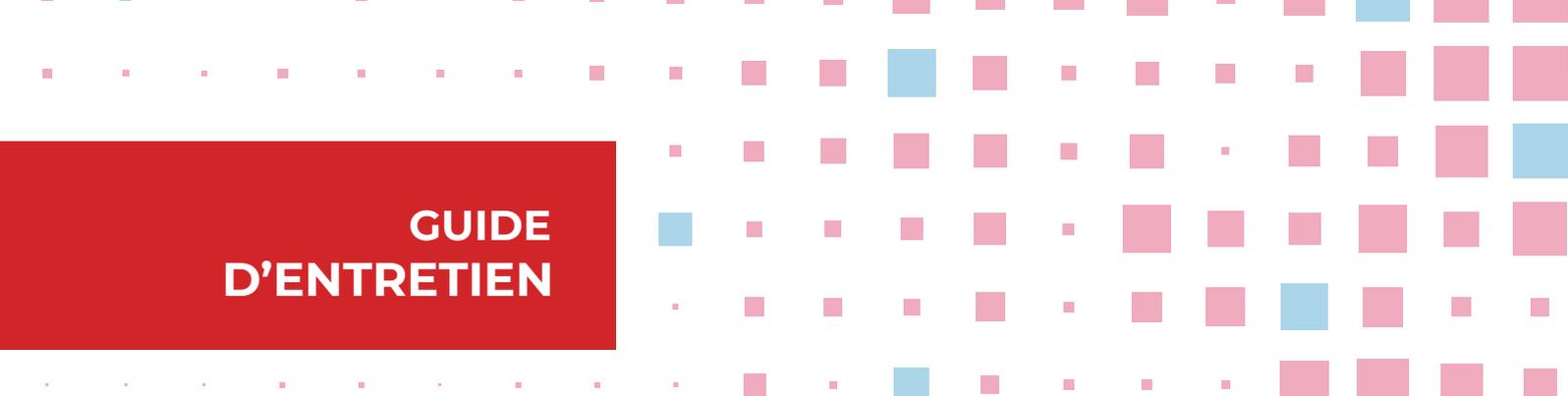


GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an

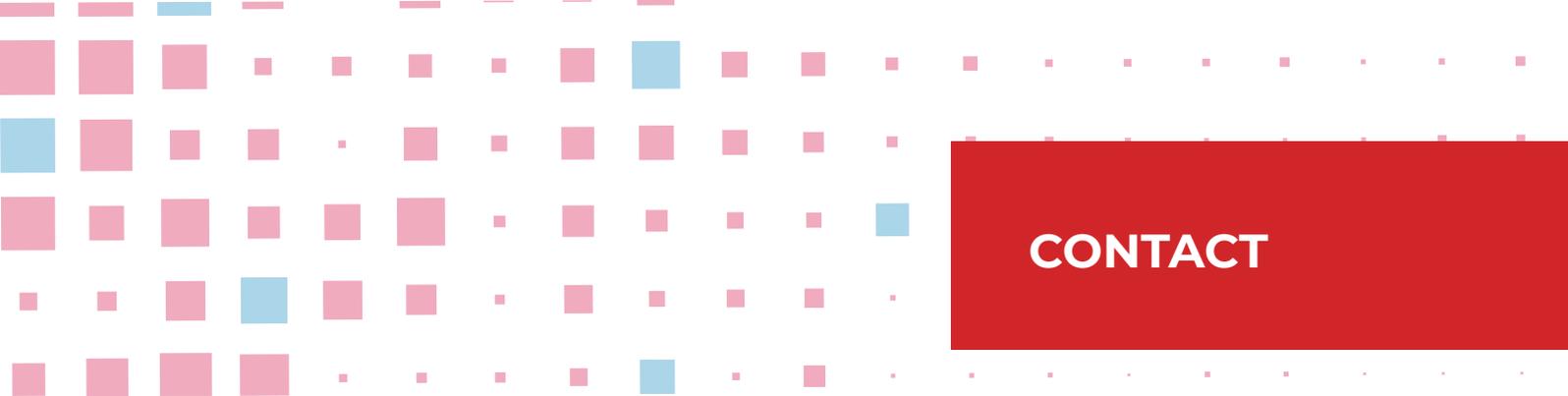

CONTACT

CARINA *Medical*

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com